

## MM 50 - Atemschutzmasken FFP 2 / KN 95

### Komfort & Schutz

Tragekomfort und hoher Schutz

>95%

Filtrationseffizienz >95%




Filtert die eingeatmete und ausgeatmete Luft

### Zuverlässiger Schutz

Schützt Sie und Ihr Umfeld vor Tröpfchen und Mikroorganismen

5-lagig

5 Lagen für besonderen Schutz

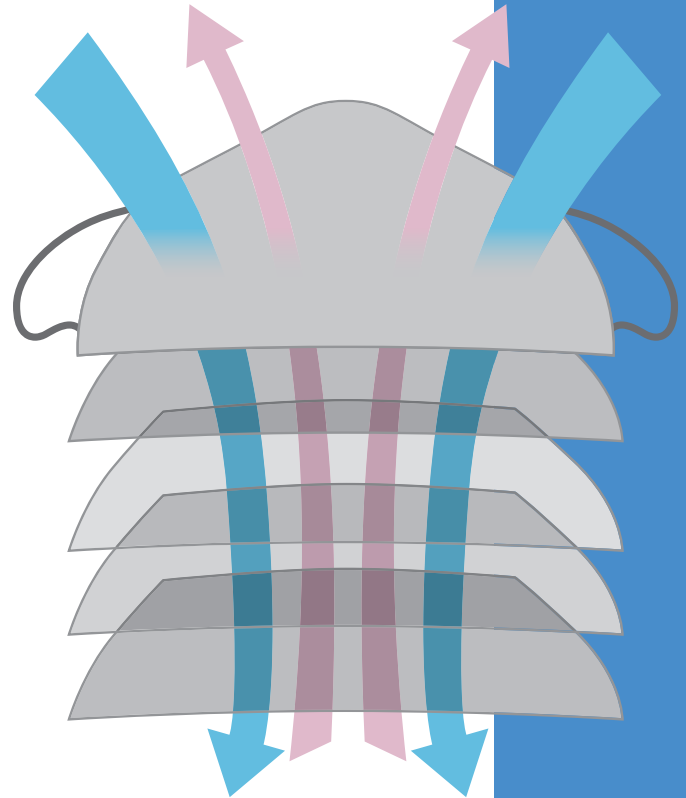

5-lagige Atemschutzmaske zum Filtern von Partikeln aus der Luft  
 Zusätzlicher Schutz gegen Tröpfchen und verschiedene Mikroorganismen

Aus hautfreundlichem und besonders weichem Vliesstoff

Besonders angenehmes Tragegefühl durch weiche, elastische Gummibänder zur Fixierung hinter den Ohren

Leicht adaptierbar für unterschiedliche Gesichtsformen durch integrierten Nasenbügel aus Metall

Inhalationswiderstand  $\leq$  350 (Pa)

Expirationswiderstand  $\leq$  250 (Pa)

Einwegmasken – nur zur einmaligen Anwendung

Nicht steril

Persönliche Schutzausrüstung

Produktklassifizierung gemäß • GB 2626-2006 Standard (KN 95)  
 • EN 149:2001 +A1: 2009 (FFP 2)

2 Jahre haltbar


CE zertifiziert; Benannte Stelle 2163

einzelverpackt

Transportkarton:	36	100
	40 Masken pro Box	10 Masken pro Beutel


EAN-Nr.:	4211125 67785 5	4211125 67787 9
----------	-----------------	-----------------

Art.-Nr.:	677.85	677.87
-----------	--------	--------

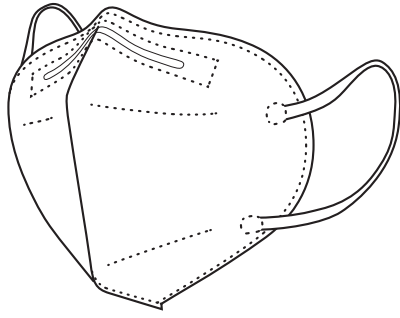

## Anwendung:

1.

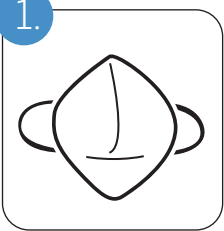


1. Maske öffnen und Nasenbügel mit den Fingern vorformen

2.



2. Setzen Sie die Maske mit dem Nasenbügel nach oben unter dem Kinn an und ziehen Sie die Bänder fest über die Ohren

3.

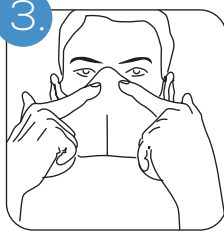


3. Passen Sie mit beiden Händen den Nasenbügel an Ihren Nasenrücken an, bis die Maske bequem sitzt und abdichtet

4.



4. Überprüfen Sie unbedingt den Dichtsitz der Maske - Bei Luftaustritt erneut anpassen

5.

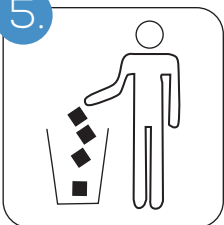

5. Maske nach Gebrauch entsorgen